


TT IN 10 STEPS

01

Preparare il Dente asciugandolo con cura usando un getto d'aria, rimuovere eventuali le eventuali cure precedenti. Si possono utilizzare tutti i denti comprese le radici, i nervi, non occorre eliminare lo smalto.


Prepare the tooth by drying it carefully using an air jet, remove any previous treatment (like root canals, filling etc.). You can use all teeth including the roots, nerves, you don't need to remove the enamel.

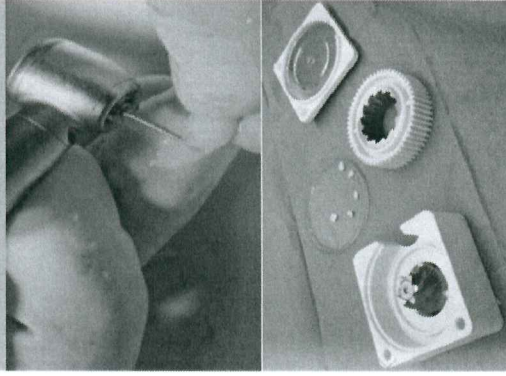

02


Inserire i denti nel Grinder MAX 3gr . Verificare le dimensioni, ottimale 5 mmx 5 mm. Il grinder si sterilizza in Autoclave. Utilizzo medio 100 Interventi.

Insert the teeth into the Grinder MAX 3gr. Check the dimensions, optimal 5mm x 5mm. The grinder should be sterilized in autoclave. Average use of grinder is 100 interventions.

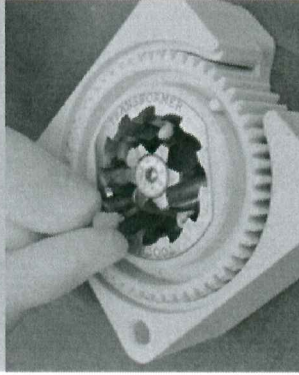

03


Collegare il cavo elettrico. Connect the electrical cable.

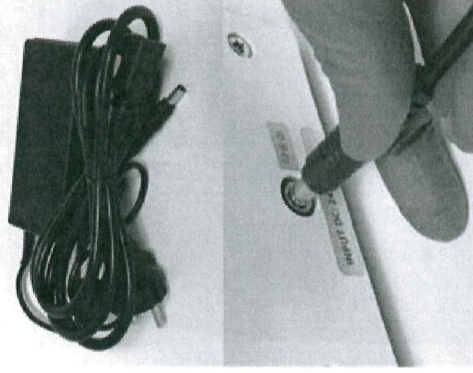

04

Accendere il TT premendo il tasto posto sul lato posteriore del TT.

Switch on the TT by pressing the button on the rear of the device.

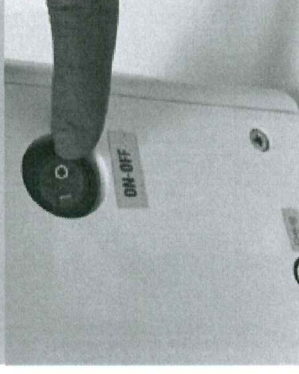

05

Aprire il coperchio.

Open the lid completely.



Nel caso che il TT non dovesse funzionare o sul Display comparissero degli errori ti consigliamo di ripetere la procedura e di guardare il video Tutorial presente sul sito www.toothtransformer.com. Dopo una prima fase, il TT si fermerà per darvi la possibilità di verificare il contenuto all'interno del trituratore e del prodotto presente nel cilindro. Dopo la verifica se tutti i denti sono stati triturati ed il prodotto è presente nel cilindro si dovrà ripartire dal punto 6. La durata del ciclo è dai 20 a 25 min. questo dipende dalla quantità dei denti presenti nel trituratore e dalle loro dimensioni. Conservazione: è possibile conservare il dente intero, denti parziali e il granulare (prima della seconda fase). L'importante che sia conservato asciutto dentro il TT Fairy che garantisce la sicurezza per il paziente. Il materiale prodotto a fine ciclo può essere utilizzato entro 3 ore. Il materiale rigenerativo TT può essere unito con altri materiali rigenerativi.



TT IN 10 STEPS



06

Inserire il grinder fino a fine corsa INSERIRLO SOLO A TT ACCESSO.


Insert the grinder, push gently until it reaches the end of the slide and gets locked into position, ONLY WHEN TT IS ON.

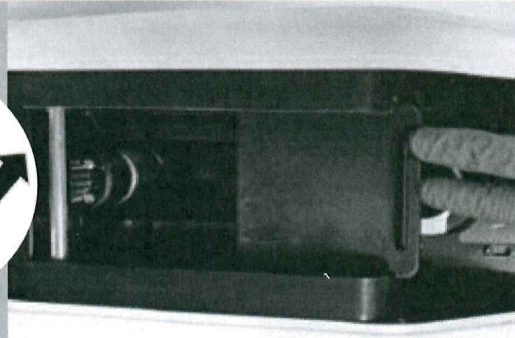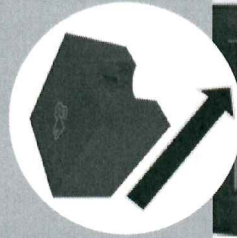

07

Inserire la cartuccia dei liquidi nel senso corretto come da immagine, fino a fine corsa.


Insert the cartridge with liquids in the correct direction as shown in the picture (the sticker facing upward). Gently push the cartridge until it reaches the end of the slide.

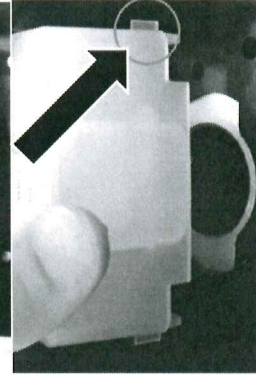

08

Perforare con il punzone metallico la cartuccia dei liquidi. La cartuccia dei liquidi è monouso non è possibile usarlo per più interventi - NON bucare la cartuccia nella parte inferiore.

Pierce the cartridge with a sharp sterilized instrument. The cartridge is for single use only, can not be used for more than one intervention. DO NOT pierce the cartridge at the bottom.

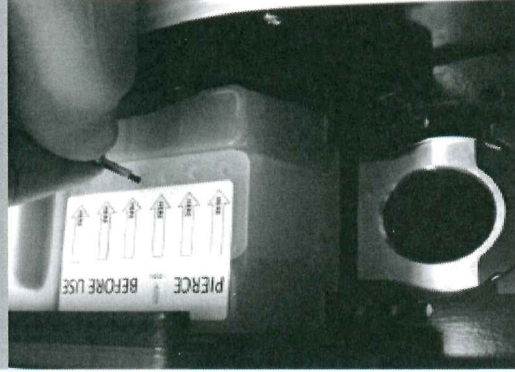

09

Inserire il cilindro fino in fondo, assicurarsi che sia nella posizione corretta e che sia comprensivo di tutte le sue parti come da immagine.

Insert the CYLINDER with the MAKER into the slot. Make sure it is in the correct position and that it includes all its parts as shown in the image.




10

Chiudere il coperchio e premere con una pressione decisa il tasto START, per far iniziare il processo.

Attenzione:
Non dimenticare di pulire il TT con Aria Compressa ad ogni fine ciclo.

Close the lid and press firmly the START button to initiate the process.

Attention:
Do not forget to clean the TT with compressed air at the end of each cycle.

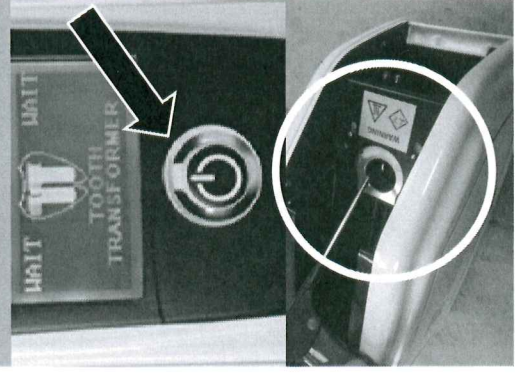

In case the TT does not work or errors appear on the display, we recommend repeating the procedure and watching the video tutorial on our website www.toothtransformer.com. After the first process phase, the TT will stop to give you the opportunity to check the content inside the grinder and the product present in the maker. After verification (all the teeth have been shredded and the product is present in the maker), you must start again from point 6. Duration of the cycle is between 20 to 25 min, this depends on the quantity of the teeth present in the grinder and their size. Preservation: it is possible to preserve the whole tooth, partial tooth or the granulate before the second phase, important that it is kept dry inside the TT Fairy. It guarantees patient safety. The material produced at the end of the cycle can be used within 3 hours. The regenerative material TT can be combined with other regenerative materials.