



PeriAcryl®90

HIGH VISCOSITY

Cyanoacrylate Oral Adhesive Rx ONLY

5 mL Multi-Use Kit
with 50 disposable pipettes and dispensing tray

PeriAcryl®90 High Viscosity

Un pansament cianoacrilat care oferă predictibilitate și eficiență chirurgicală!

Ce este PeriAcryl®90 High Viscosity?

PeriAcryl®90 High Viscosity este un amestec special de adezivi cu cianoacrilat butil și octil special conceput pentru aplicare în cavitatea bucală. Formula PeriAcryl®90 High Viscosity are o consistență care permite o aplicare controlată fără a cauza deșeuri de produs. PeriAcryl®90 de la GluStitch Inc este cel mai bine vândut cianoacrilat dentar la nivel mondial

La ce se folosește PeriAcryl®90 High Viscosity?

PeriAcryl®90-HV poate fi folosit ca un pansament pe siturile libere donatoare de grefă gingivală. Este, de asemenea, eficient în susținerea suturilor în închiderea chirurgicală și în stabilizarea și protejarea membranelor și a grefelor.

De ce să folosiți produsele PeriAcryl®90?

- Simplifică procedurile chirurgicale
- Crește eficiența procedurii
- Îmbunătățește rezultatele estetice
- Protejează împotriva lipsei de respectare a indicațiilor de către pacient
- Mărește confortul pacientului
- Economisiți timp și bani

Caracteristicile și beneficiile PeriAcryl®90 High Viscosity:

Polimerizează rapid atunci când vine în contact cu apa sau saliva.

Rămâne pe sit timp de până la 14 zile când se aplică în mai multe straturi.

Disponibil într-un kit multifuncțional, special conceput pentru specialiștii dentari, pentru a vă reduce costurile pe utilizare. Fiecare kit conține 5 ml de adeziv și 50 de pipete de unică folosință.

Colorat în mov închis pentru a crește vizibilitatea în timpul aplicării.

PeriAcryl®90 High Viscosity este de 9 ori mai gros decât formula originală, ceea ce permite un control mai mare în timpul aplicării.

WWW.PERIACRYL.COM
WWW.SMARTNOTE.RO



Căutați „Smartnote” pe Facebook și veți găsi pagina noastră în care postăm fotografii și clipuri video despre modul în care medicii folosesc PeriAcryl®90 și despre rezultatele excelente pe care le obțin.



Distribuitor autorizat în România, Smartnote SRL, punct de lucru:
Str. Alexandru Constantinescu nr 45, Sector 1, București,
Tel: 0741240303




Smartnote
SMART MEDICAL SOLUTIONS

Cum să folosesc PeriAcryl®90 High Viscosity?


După scoaterea PeriAcryl®90 din flacon cu una dintre pipetele furnizate, aplicați o cantitate corespunzătoare deasupra zonei operate și tamponați cu un tifon umed din bumbac. În câteva secunde, se va forma un film protector.

În imaginile de mai jos, PeriAcryl®90-HV este etapa finală a acestui protocol de conservare a cavității, aplicat peste membrană și suturi.

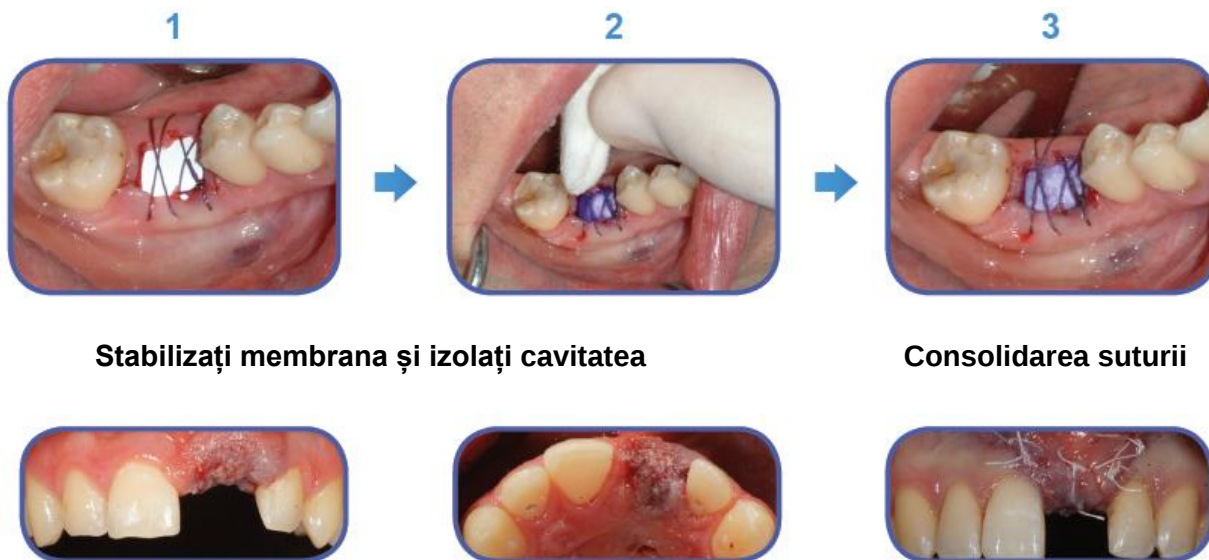

Stabilizați membrana și izolați cavitatea

Consolidarea suturii

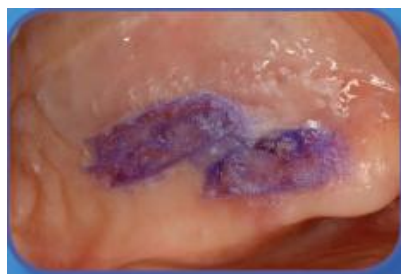

Sit donator *FGG



Sit donator *CTG



***partea dreaptă – jos, în ziua operației**



***același pacient, la 1 săptămână de la operație**



În ce alte situații se pot folosi PeriAcryl®90 și PeriAcryl®90-HV?

Pe siturile donatoare de FGG și CTG, odată cu realizarea hemostazei.

Peste grefele gingivale libere pentru a întări suturile și a ajuta la protejarea țesutului greșat.

Peste leziuni melanotice postoperator